

SOLUTION

OPHTALMIC

# jazz essentiel®

Solution  
d'entretien  
Multifonctions





**INNOVATION**  
Suppression du  
sur-emballage  
Étui intégré  
au flacon

# L'ESSENTIEL DE LA DÉCONTAMINATION ET DE LA PROTECTION

## Combinaison du PHMB (0.0002%) et du Polyquaternium

**JAZZ ESSENTIEL** décontamine efficacement tout en préservant la physiologie oculaire grâce à la combinaison entre une concentration idéale en PHMB (0.0002%) et le Polyquaternium.

**Optimisation de l'acuité visuelle** grâce au pluronic contenu dans la solution Jazz Essentiel qui **élimine les dépôts** lipidiques et protéiques et **inhibe l'adhérence** des micro-organismes

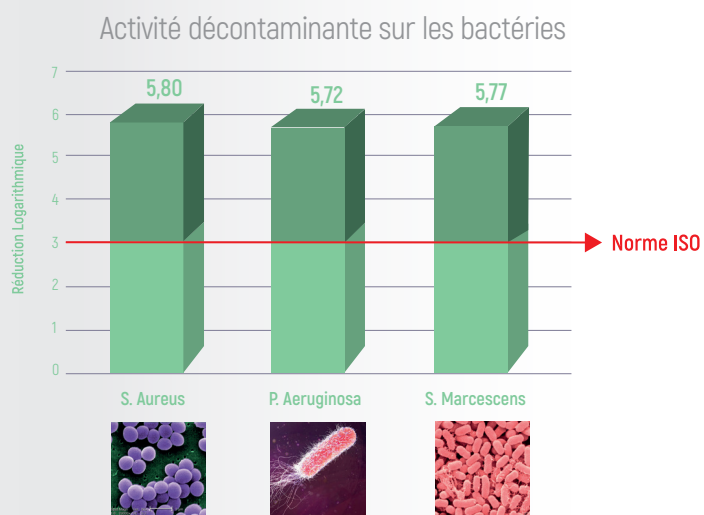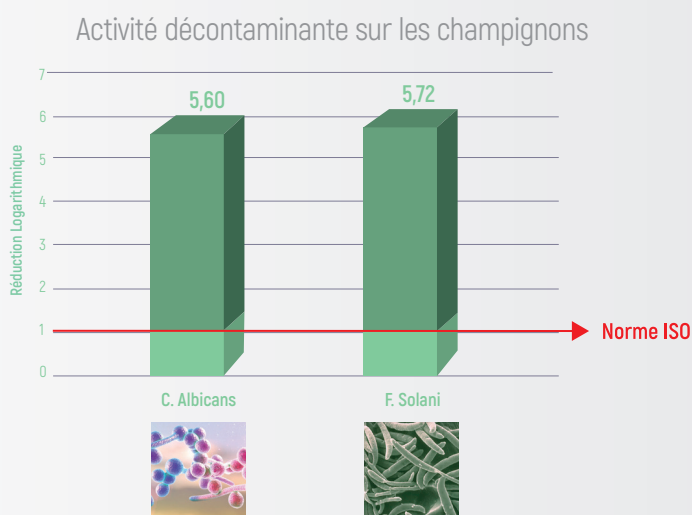

## INNOVATION : TAMPON CITRATE POUR PRESERVER LA SURFACE OCULAIRE

L'acide citrique est utilisé pour stabiliser le pH de la solution, cette molécule présente dans le citron a la particularité de mieux solubiliser le calcium que les tampons phosphates.

### LE TAMPON CITRATE :

- N'induit pas de calcification<sup>1</sup>
- A des propriétés de guérison cornéenne<sup>1</sup>

Conformément aux recommandations en vigueur, le massage mécanique au retrait des lentilles souples est obligatoire (se reporter au guide d'utilisation). Il permet d'éliminer 90% des dépôts.



## L'ESSENTIEL DU CONFORT

**JAZZ ESSENTIEL** désinfecte, hydrate et lubrifie les lentilles pour un confort dès la pose et tout au long de la journée grâce à la synergie

- De l'**hypromellose** aux propriétés lubrifiantes
- Du **hyaluronate de sodium** aux propriétés hydratantes, de rétention d'eau et anti-inflammatoires efficaces pour réduire la sécheresse oculaire<sup>2</sup>

Ces 2 agents de confort complémentaires font de **JAZZ ESSENTIEL** la solution multifonctions recommandée pour les porteurs aux yeux sensibles ou souffrant de sensation d'oeil sec.

## L'ESSENTIEL POUR LA PLANÈTE

Ophtalmic Compagnie est engagée dans une démarche RSE depuis 2022 et a été le 1<sup>er</sup> laboratoire de lentilles de contact à obtenir le label RSE en 2023.

Cet engagement sociétal et environnemental est mis en place à différentes échelles :

- en interne avec notamment pour la partie environnementale : collecte et revalorisation des déchets générés par les activités d'Ophtalmic Compagnie
- en privilégiant les prestataires engagés dans la gestion durable de la forêt
- mais aussi dans les produits qu'elle propose.

Au-delà de la formulation de la solution Jazz Essentiel, il a été fait le choix d'une fabrication :

- 🍃 **En Europe** : Italie
- 🍃 **Sans sur-emballage** : suppression de 1.89 tonnes de carton et 100 kg de papier pour les notices\*
- 🍃 Avec un **flacon recyclable**

\*Estimation établie sur 1 consommation équivalente à un an de solution Jazz Comfort

# COMPOSITION

PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
PHMB (0.0002%) Polyquaternium	· Décontamine
EDTA	· Agent chélateur
Pluronic	· Elimine les dépôts lipidiques et protéiques · Inhibe l'adhérence de certains micro-organismes
Hyaluronate de sodium	· Hydrate et lubrifie · Antioxydant <sup>3</sup>
Hypromellose (HPMC)	Accroît la viscosité et prolonge le confort
Tampon citrate	Stabilise le pH de la solution Effets de guérison cornéenne <sup>1</sup>

## INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, conservation, hydratation, lubrification, rinçage.  
Pour tous types de lentilles souples en hydrogel et silicone-hydrogel.  
Le massage des lentilles est obligatoire.

## CONDITIONNEMENTS

Sans sur-emballage



Flacon 400ml  
Étui intégré

Flacon 100ml

Contacts - Commandes :

Tél : **0 820 777 510** Service 0,12 € / min  
prix appel

Mail : [commandes@ophtalmic.fr](mailto:commandes@ophtalmic.fr)

**Ophtalmic**  
COMPAGNIE

[www.ophtalmic-compagnie.fr](http://www.ophtalmic-compagnie.fr)



Promouvoir  
la gestion durable  
de la forêt

1. Sim, P.; Strudwick, X. L.; Song, Y. M.; Cowin, A. J.; Garg, S. Influence of Acidic PH on Wound Healing In Vivo: A Novel Perspective for Wound Treatment. Int J Mol Sci 2022, 23 [21]
2. Michaud, L.; Frenette, B. Evaluation of Sodium Hyaluronate Lubricating Drops Used before Insertion of Contact Lenses on Symptomatology, Severity, and Intensity of Ocular Dryness. ISRN Ophthalmol. 2012, 2012, 1-8
3. Saettone MF et al. Int J Pharm 1989; 51: 203-12

JAZZ Essentiel est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb - Fabricant : Esoform. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE 0425. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice du produit pour une utilisation correcte - Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'assurance maladie - Ophtalmic Compagnie, Bâtiment Eddington, ZA de Paris Nord 2 - 33 Rue des Vanesses - CS 55306 Villepinte - 95940 Roissy CDG Cedex France. RCS Bobigny B 352490.544.00041. Brochure\_Jazz\_Essentiel\_04.26\_V2