

GUIDE PRODUIT



La lentille mensuelle conçue pour un confort supérieur et constant tout au long du mois^{1,2}

À quel besoin porteur répond ACUVUE[®] VITA[™] ?

ACUVUE[®] VITA[™] s'adresse aux patients qui souhaitent spécifiquement porter des lentilles mensuelles mais veulent éviter la perte de confort en fin de mois, qui peut être causée par une baisse d'hydratation au sein de la lentille.

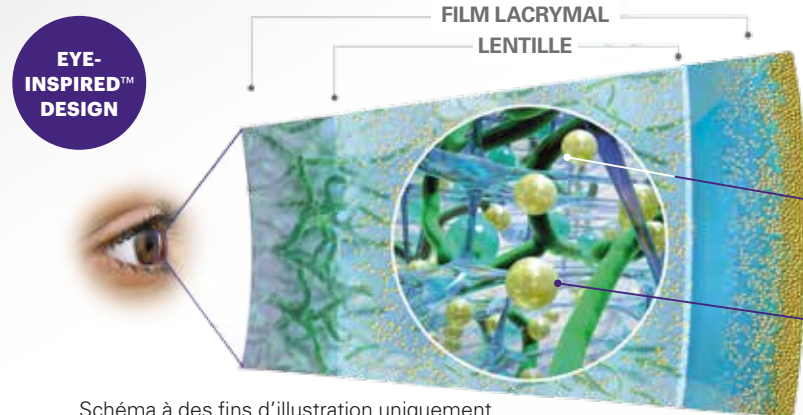


Schéma à des fins d'illustration uniquement

ACUVUE[®] VITA[™] comparée à AIR OPTIX[®] AQUA, Biofinity[®] et ULTRA[™]

Les évaluations patients ont été supérieures pour ACUVUE[®] VITA[™] sur :

- le critère « Confort général » en semaines de port 1, 2, 3 et 4^{1,2}.
- le critère « qualité visuelle en fin de mois »^{1,4}

HydraMax[™] : Une nouvelle technologie

Formulation d'un silicone hydrogel sans traitement de surface conçu pour aider à **MAXIMISER** et à **MAINTENIR** l'hydratation.

• HYDRATATION MAXIMISÉE

Grâce à un apport maximum d'agent hydratant intégré à la lentille.

• HYDRATATION MAINTENUE

Grâce à une densité et une répartition optimales des lipides bénéfiques à travers la lentille.

AUTRES BÉNÉFICES ACUVUE[®]

- Filtre UV de classe 1*
- Profils de bords INFINITY EDGE[™] pour plus de confort

NOUVEAUX PORTEURS

- Vos patients vous demandent-ils des lentilles mensuelles par souci d'économie ?
- Vos patients veulent-ils profiter de leurs lentilles mensuelles durant 1 mois complet ?

Caractéristiques techniques

Matériau	senofilcon
Rayon	8,4 mm et 8,8 mm
Diamètre	14.0 mm
Technologie	HydraMax [™]
Protection UV*	Classe 1 UVA : 93,4% UVB : 99,8%
Hydrophilie	41%
Epaisseur au centre	0.07 mm (3.00D)
Transmissibilité à l'oxygène (Dk/t)**	147 x 10 ⁻⁹ (3.00D)
Flux en oxygène ⁵ (% disponible au centre de la cornée)	98% (oeil ouvert)
Indicateur de manipulation	Teinte bleutée / Indicateur endroit-envers « 123 »
Renouvellement	Mensuel
Puissances	-0.50D à -6.00D par 0.25D -6.50D à -12.00D par 0.50D +0.50D à +6.00 par 0.25D +6.50D à +8.00D par 0.50D
Conditionnements	6 lentilles

Questions clés

PORTEURS ACTUELS DE MENSUELLES

- Vos patients sont-ils satisfaits du confort de leurs lentilles jusqu'à la fin du mois ?
- Vos patients compensent-ils l'inconfort par diverses actions pour maintenir le port jusqu'en fin de mois ? (larmes artificielles, retrait des lentilles plus tôt dans la journée ou au cours du mois, interruption occasionnelle de port)

* Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE[®] possèdent un filtre UV de Classe 1 ou 2, aidant à protéger la cornée et l'intérieur de l'œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à une protection oculaire absorbant les UV telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas l'intégralité des tissus oculaires annexes. ** Transmissibilité à l'oxygène au centre d'une lentille de -3.00D, utilisant une valeur de perméabilité DK corrigée des effets de courbe et de bord. Unités : (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) à 35°. La perméabilité DK a été mesurée par la méthode polarographique. 1. Données internes JJVCC 2016. Etude menée aux USA, en insu, randomisée, sur 30 jours de port journalier en lentilles à renouvellement mensuel, n=533 porteurs de lentilles silicone hydrogel (n= 134 ACUVUE[®] VITA[™]; n= 133 AIR OPTIX[®] AQUA, n=130 Biofinity[®] et n=136 ULTRA[™]). Evaluation du confort et de la vision, à l'issue de chaque semaine de port. 2. Données internes JJVCC 2016, Technologie HydraMax[™]. 3. Nichols J et al. TFOS International Workshop on CL Discomfort. IOVS 2013;54. 4. Données internes JJVCC 2016. 3 études d'un mois de port chez 634 yeux de porteurs de lentilles de contact souples aux Etats-Unis. 5. % d'oxygène disponible au centre de la cornée (oeil ouvert) ; avec index 100% pour un oeil sans lentille; Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci. 2005 Jun;82(6):467-72. ACUVUE[®], ACUVUE[®] VITA[™], EYE-INSPIRED[™], INFINITY EDGE[™] et HydraMax[™] sont des marques de ETHICON SAS, 1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. Société au capital de 17 069 630 euros. RCS Nanterre B 612 030 619. © ETHICON SAS 2016. Les lentilles de contact ACUVUE[®] sont destinées aux amétropes sous réserve d'une prescription médicale. Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation y accompagnant le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIa (BSI0086). Mandataire Européen : Johnson & Johnson Medical Ltd. (Royaume-Uni). « Document réservé à l'usage des professionnels de santé ». CL1633-FR-APR-16-07-02.

NOUVEAU ACUVUE[®]
vita[™]
MARQUE DE LENTILLE DE CONTACT



Conçue pour **confort supérieur et constant, tout au long du mois**^{1,2}

1. Données internes JJVCC 2016. Etude menée aux USA, en insu, randomisée, sur 30 jours de port journalier en lentilles à renouvellement mensuel, n=533 porteurs de lentilles silicone hydrogel (n= 134 ACUVUE[®] VITA[™] ; n= 133 AIR OPTIX[®] AQUA, n=130 Biofinity[®] et n=136 ULTRA[™]). Evaluation du confort et de la vision, à l'issue de chaque semaine de port. 2. Données internes JJVCC 2016, Technologie HydraMax[™].

www.jnjvisioncare.fr
INFORMATIONS TECHNIQUES

 **N°Vert 0 800 007 660**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE